


■ ■ wissner-
■ ■ bossenhoff

Fonctionnel. Intelligent. Humain.

sentida sc

Lit de soins bas universel

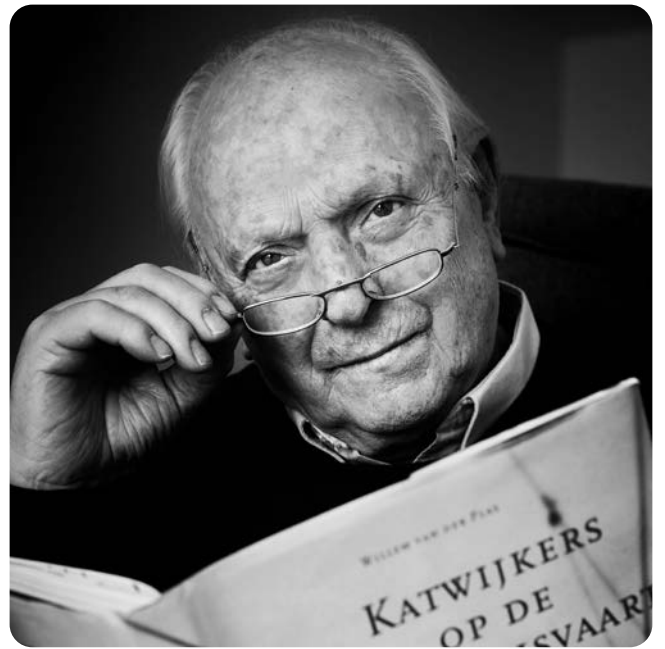



Aussi diversifié que vos besoins

sentida sc – lits de soins bas universels

Grâce aux progrès techniques et médicaux, l'espérance de vie humaine ne cesse d'augmenter depuis des décennies. Le grand âge que beaucoup de nos aînés atteignent aujourd'hui a de multiples impacts.

De nombreuses personnes âgées souhaitent aujourd'hui finir leurs jours dans un environnement qui leur est familier. En parallèle, la perception des seniors dans la société évolue. De nos jours, la retraite n'est plus un synonyme d'arrêt, c'est plutôt une phase de la vie où les personnes âgées poursuivent des intérêts variés et souhaitent vivre de manière active.

La vieillesse pousse à rechercher de nouveaux concepts d'habitat et de vie. Des concepts qui répondent au besoin de disposer de logements adéquats dont l'équipement offre plus de convivialité, d'individualité, de sécurité, de confort et de flexibilité.

wissner-bosserhoff a conscience de ces exigences et de ces changements.

En tant qu'entreprise internationale opérant dans le domaine des soins, nous nous y sommes préparés.

Les personnes âgées ont des exigences et des besoins différents concernant leur vie et leur milieu de vie.

Grâce à des concepts innovants conçus sur mesure pour le nouveau lit de soins sentida sc, nous pouvons répondre aux différentes exigences de manière encore plus flexible, plus efficace et plus adaptée aux besoins. Par des solutions spécifiques, nous souhaitons favoriser le maintien et l'encouragement de la mobilité individuelle comme un objectif de soins global et essentiel.

Fonctionnel. Intelligent. Humain.



Le domaine des soins est un domaine extrêmement exigeant : il demande de l'empathie, une fibre sociale, de la polyvalence, des compétences interculturelles et surtout du professionnalisme.

De grands changements et défis viendront bientôt le bouleverser. Des développements techniques et numériques marqueront le domaine des soins de manière décisive.

Thomas Erbslöh, directeur général de la société wissner-bosserhoff GmbH



Fonctionnel. Intelligent. Humain.

Les lits de soins sentida sc haut de gamme de wissner-bosserhoff sont l'application rigoureuse, et surtout sans compromis, d'une approche à 360° visant à développer des exigences pour moderniser les soins, mais aussi à offrir des soins et un accompagnement dans les formes de logements les plus diverses.



10

Mobiliser selon l'état du résident

Le maintien et l'encouragement de la mobilité sont un objectif central dans le domaine des soins professionnels.



16

Dormir en toute sécurité

Se reposer et dormir avec les fonctions adaptées d'un lit de soins bas universel.



18

Capteurs de sortie de lit

Les capteurs intelligents offrent une aide et une sécurité personnalisée – sans restrictions.



22

Connecter avec professionnalisme

Des solutions connectées innovantes qui apportent une aide dans les activités de soins individuelles et les processus de soins complexes.



24

Mise en réseau intelligente

Être durablement préparé aux exigences à venir en matière de soins.



28

Soigner en fonction des besoins

Accéder au résident de manière sûre et optimale.

Concepts

Découvrez des concepts adaptés, spécialement conçus pour les formes de logements, les exigences et les besoins les plus divers.

Vieille ville



8

Vue sur la mer



14

Chalet



20

Coucher de soleil



26

Provence



32

Gamme sentida sc

Modèle

Homely



Mobile



Accessible



Aussi diversifié que vos besoins.

Tous les modèles sentida sc sont faciles à manœuvrer et ne nécessitent aucun effort – tout particulièrement le modèle «Mobile» équipé d'un choix de roues plus grandes pour un confort de déplacement plus facile.

Ainsi, les résidents fortement handicapés et immobiles peuvent participer à la vie de leur résidence ou de leur établissement de soins dans le lit médicalisé. La variante «Mobile» dispose d'un système de freinage centralisé en un seul point, en pied de lit. Ce système est également disponible en option pour la version «Homely», livrée de base avec un frein centralisé par pédales bilatérales à la tête et au pied du lit.

Le modèle «Accessible» peut être freiné grâce à une barre en pied de lit. Les étriers de blocage des roulettes côté tête permettent une plus grande flexibilité ainsi qu'un plus grand confort lors des manœuvres et du placement sûr du lit.

Manoeuvrabilité

Le lit peut être déplacé dans toutes les directions quelle que soit la hauteur du plan de couchage.

Le lit peut être déplacé dans toutes les directions quelle que soit la hauteur du plan de couchage.

Le lit peut être déplacé dans toutes les directions quelle que soit la hauteur du plan de couchage.

Roues

4 roues double galet recouvertes d'un habillage esthétique

4 roues 100, 125 ou 150 mm

4 roues double galet en tête de lit et 4 roues double galet en pied de lit, diam 50 mm

Système de freinage

Frein centralisé par pédales bilatérales en tête et en pied de lit - frein centralisé en pied disponible en option.

Frein centralisé en pied de lit

Barre de frein en pied de lit et étrier de blocage unidirectionnel en tête de lit.



Système de freinage tête et pied ou central

- Freinage rapide et simple
- Manipulable des deux côtés

Système de freinage central

- Freinage rapide et facile
- Bonne accessibilité de la barre de frein à n'importe quelle hauteur

Système de freinage côté pied

- Freinage rapide et facile
- Bonne accessibilité de l'étrier de frein dans chaque position de hauteur

Blocage de la roulette côté tête

- Utilisation simple grâce à la technique de blocage semi-automatique
- Blocage directionnel intégré
- Déplacement stable et placement sûr du lit

Charge de fonctionnement maximale en toute sécurité



Réglage de la hauteur

23 - 80 cm

23 - 80 cm*

23 - 80 cm

Sommiers

87 / 90 x 200 cm
87 / 90 x 210 cm
100 x 200 / 210 cm (sentida sc-xl)

87 / 90 x 200 cm
87 / 90 x 210 cm
100 x 200 / 210 cm (sentida sc-xl)

87 / 90 x 200 cm
87 / 90 x 210 cm



Concept Vieille Ville

Modèle Dfx | Homely
Décor Érable Plane



wissner-bosserhoff | sentida sc



sentida sc | wissner-bosserhoff

sentida sc Homely avec système de freinage central, spécialement conçu pour :

- les centres d'hébergement médicalisé
- les résidences services
- les cliniques de rééducation
- l'apport de soins spécifiques à des résidents avec des capacités physiques restreintes, voire immobiles



Mobiliser selon l'état du résident

Le maintien et l'encouragement de la mobilité sont un objectif central dans le domaine des soins professionnels

Pour l'Homme, il est primordial de rester mobile. La mobilité est un facteur décisif pour toutes les activités de la vie quotidienne ; beaucoup d'autres choses en dépendent.*

Le maintien et l'encouragement de la mobilité individuelle – notamment celle des personnes âgées – sont donc, non sans raison, des catégories clés dans le domaine des soins.

La prise de mesures appropriées constitue une contribution essentielle pour éviter l'apparition de nouvelles dégradations fonctionnelles et de nouveaux troubles de la santé. Ces derniers peuvent affecter la

mobilité et déclencher ainsi un processus pouvant mener à une dépendance plus forte vis-à-vis de l'assistance et le besoin de soins de longue durée.*

L'Homme et ses ressources sont au centre de nos préoccupations

Il n'existe pas de techniques standard de mobilisation qui aident chaque résident de la même manière.

Les mesures d'aide et d'accompagnement ne peuvent être adaptées qu'en fonction de la situation et de l'individu. Le maintien et l'encouragement de la mobilité ne

peuvent donc pas non plus être considérés de manière isolée, mais doivent être associés à des exigences d'ergonomie et à des processus de travail ergonomiques. Cela vaut également pour la mobilisation des patients "hors du lit" et "dans le lit" en toute sécurité.

Le lit de soins bas universel sentida sc de wissner-bosserhoff est conçu de manière telle que son équipement peut être adapté aux différents besoins et à des exigences spécifiques.



Je me sens bien dans mon lit : je peux le régler simplement et je peux me lever facilement - sans aide.

Walter Schulte, résident



Voir la vidéo

Solution 1 Barrière latérale SafeFree® – Mobilisation sécurisée indépendamment de la taille du résident




SafeFree® est

- est optimal pour une sortie de lit grâce à sa segmentation spécifique,
- propose 4 niveaux de hauteur réglables selon les besoins individuels,
- offre un soutien stable et une bonne prise en main,
- est une aide sûre pour se lever - seul ou avec une assistance.

Le PLUS de sentida sc :

Les options individuelles d'équipement ultérieur contribuent à la durabilité et à la sécurité en matière d'investissement.

Solution 2 SafeLift et MobiStick 2 – Supports d'aide à la mobilisation

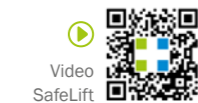

SafeLift est

- facile à utiliser pour le résident,
- une aide pour se lever et se mobiliser,
- dotée d'une manette pour le réglage de la hauteur et de l'inclinaison du relèbe-buste sans batterie ni câble,
- réglable individuellement pour chaque résident.



MobiStick 2 est

- rapide et facile à utiliser,
- adapté et facile à manipuler,
- une aide pour s'asseoir le dos droit au bord du lit,
- ergonomique et offre un appui supplémentaire pour se mettre debout.



Solution 3 Télécommande SafeControl® – Claire, ergonomique et intuitive

SafeControl® est

- dotée d'un design clair et ergonomique,
- intuitive et exclut tout risque d'erreur grâce à la pré-programmation,
- parfaitement lisible dans l'obscurité grâce aux capteurs de mouvement avec rétroéclairage intégré
- flexible et peut être placée de manière sûre sur la barrière latérale SafeFree®
- équipée de fonctions de soins spécifiques
- protégée contre toute erreur de manipulation grâce à une fonction de verrouillage intégrée.

Le PLUS de sentida sc :

La télécommande SafeControl® se monte rapidement, sans outil et sans effort – à gauche ou à droite du lit, en fonction des besoins.



Voir la vidéo

Fonctions pour le résident

- Réglage du relève-buste
- Autocontour
- Réglage de la hauteur

Touches d'activité

- Haut / bas
- Indicateur du statut LED

Fonctions de soins

- Position fauteuil automatique
- Position de prophylaxie automatique

3 niveaux de sécurité SafeControl®

Mode soignant :
Toutes les touches de sélection sont débloquées

Mode verrouillage :
Toutes les fonctions de la télécommande sont verrouillées


Mode résident :
Les touches de sélection gris clair sont à la disposition du résident

Les mesures de soins servant au maintien et à l'encouragement de la mobilité contribuent à préserver les principes élémentaires d'une vie autonome.


Norme professionnelle selon l'art. 113a du livre 11 du Code social allemand (SGB XI) "Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege" (traduction littérale : "Maintien et encouragement de la mobilité dans le domaine des soins"), mise à jour de 2020

Solution 4 Double translation du sommier – Mobiliser le patient dans le lit de manière sûre et confortable

— Sommier standard, sans soulagement

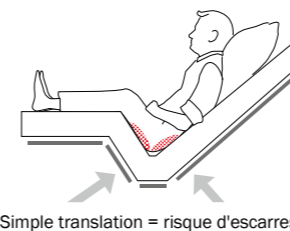

+ Sommier wibo avec un soulagement des compressions

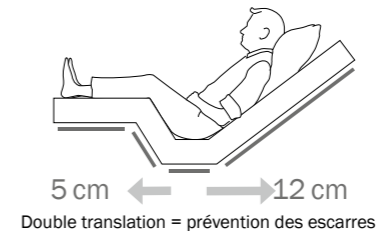

Double translation = 17 cm plus de place dans le lit !

La double translation

- optimise la surface de contact dans la zone d'assise, puisque la surface du relève-buste et du relève-cuisses est agrandie,
- réduit la pression sur les zones sensibles du corps, comme les fesses et le coccyx,
- facilite la respiration car un plus grand espace est créé par une position assise détendue au niveau du ventre et de la poitrine,
- offre un positionnement préventif et confortable aux résidents immobiles, en combinaison avec le long relève-buste de près de 90 cm.

Solution 5 Positions automatiques – Réglage rapide, simple et ergonomique avec une seule touche



Regarder la télévision, lire ou prendre le petit-déjeuner au lit grâce à la position fauteuil automatique



Prévention des escarres et soulagement des talons grâce à la position de prophylaxie automatique

Les positions fauteuil et Fowler automatiques

- favorisent le bien-être notamment des résidents immobiles,
- améliorent la qualité de vie des résidents dans le lit,
- soutiennent les stratégies de soin adoptées dans le cadre de la prévention des escarres et du traitement des plaies.



Concept Vue sur la mer

Modèle G | Homely
Décor Chêne d'Italie



sentida sc, Homely avec un frein centralisé en tête et en pied du lit, spécialement conçu pour:

- les établissements d'hébergement médicalisé
- les résidences services
- l'apport de soins spécifiques à des résidents peu diminués physiquement
- les unités de vie pour personnes démentes



Solution 1 Position basse 23 cm – Dormir en toute sécurité, sans réduire les besoins personnels



- La position basse de 23 cm offre**
- une esthétique accueillante sans éléments gênants,
 - une solution pertinente sans que le résident ne se sente limité,
 - la possibilité au résident de se lever de ses propres forces en toute sécurité.



Dormir en toute sécurité

Position basse adaptée aux besoins, permettant de se reposer et de dormir confortablement

La plupart des gens souhaitent rester mobiles et indépendants à tout âge. Cependant, en vieillissant la mobilité est diminuée, voire limitée. En parallèle, le risque de chute augmente et il reste élevé pour les résidents des établissements d'hébergement médicalisé. Les chutes entraînent fréquemment des blessures qui nécessitent un traitement. Mais même avec des chutes de moindre conséquence, les processus de guérison sont souvent longs, et la confiance en ses propres capacités diminue. Vient s'ajouter la peur de retomber (la "peur des chutes"). Celle-ci peut être plus éprouvante que la chute elle-même.

La peur des chutes est très répandue chez les personnes âgées.** Les personnes qui ont peur de tomber réduisent leur mobilité. Avec le temps, l'indépendance diminue et les besoins de soins peuvent augmenter.***

La peur des chutes apparaît plus fréquemment la nuit.

L'obscurité complique l'orientation dans la pièce et l'estimation des distances ; il devient difficile de marcher avec assurance.

Pour rompre ce cercle vicieux, il faut agir sur le renforcement ciblé et adapté de la confiance en soi, et donc sur un moyen de prévenir la peur des chutes ; il faut proposer un soutien optimal afin d'améliorer les ressources physiques.

Grâce à des équipements de lit durables, s'inscrivant dans des concepts précis, sentida sc wissner-bosserhoff offre des solutions qui tiennent compte des différents niveaux de soins, mais aussi des possibilités et des capacités individuelles des résidents âgés.

Solution 2 SafeFree® en position d'orientation – Réduire la peur sans barrières superflues



- La position d'orientation de la barrière latérale côté tête peut**
- renforcer la sécurité, en combinaison avec la position basse de 23 cm,
 - éviter l'usage de barrières superflues tout en réduisant le risque de chute.

Le PLUS de sentida sc :
La position basse de 23 cm associée à un concept de barrière latérale breveté et adaptable, permettent de considérer chaque cas lors de l'élaboration des mesures de soins.

Solution 3 SafeFree® fix & flex – Adaptées aux différents besoins de soins de base



Aucune protection



Protection 3/4




Protection légère



Protection intégrale

Les 4 demi-barrières latérales apportent un soutien aux personnes à risque de chutes et permettent de prendre en compte chaque situation. Elles peuvent être combinées aux multiples options de configuration des barrières latérales SafeFree® – qui sont disponibles dans les variantes fix ou flex et comme protections de lit partielles ou intégrales.

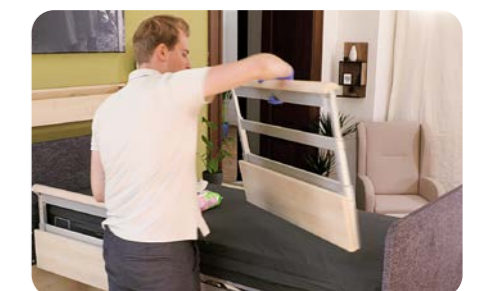

* Recherche et Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten (traduction littérale : Recherche et analyse des notions de dépendance et des instruments d'appréciation) ; Copyright © GKV-Spitzenverband (Fédération nationale des caisses d'assurance maladie) 2011 / ISBN : 978-3-7747-2308-5 Sturzprophylaxe in der Pflege - Expertenstandards leicht verständlich (traduction littérale : Prévention des chutes dans le domaine des soins - Comprendre facilement les normes des experts) ; date : janvier 2013, en tenant compte de la 1^{ère} version mise à jour des normes des experts parues en 2013 / Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) e.V. (Association d'intérêt fédéral pour les personnes âgées et les personnes ayant besoin de soins) | ** S. Schlee : Sturz im Alter und seine Folgen - Der Anfang vom Ende? (traduction littérale : Les chutes des personnes âgées et leurs conséquences - le début de la fin ?) ARS MEDICI DOSSIER XI, 2016 | *** A. Zegelin : «Festgenagelt sein» – Der Prozess des Bettlägerigwerdens durch allmähliche Ortsfixierung (traduction littérale : «Être cloué au lit» – Le processus d'attente par fixation progressive) ; Pflege (Soins) 2005 ; 18:281-288 © by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Berne 2005



Solution 4 SafeSense® –

Sortie de lit sûre et autonome avec notification d'appel individuelle

Le système d'alarme de sortie de lit

- signale au personnel soignant que le résident est en train de quitter son lit,
- fonctionne avec une minuterie réglable (0 - 30 min) sur le principe du feu tricolore,
- peut être associé à une veilleuse de nuit automatique qui s'allume lors de la sortie du lit,
- peut être associé au système d'appel infirmier,
- est disponible avec une connexion filaire ou en Wi-Fi,
- peut recevoir un équipement ultérieur.**

Le PLUS de sentida sc :

C'est la somme des solutions qui fait toute la différence : position basse de 23 cm + concept de barrière latérale breveté et adaptable + système d'alarme de sortie de lit intelligent

Système d'alarme de sortie de lit – Qu'est-ce que ça signifie au juste ?

SafeSense® signale au personnel soignant que le résident a quitté son lit ou qu'il est en train de le quitter. En cas de chute, cela permet de réagir plus vite que lors des contrôles de routine.

En principe, un système d'alarme de sortie de lit fonctionne comme un feu tricolore. Son fonctionnement peut être illustré et expliqué de manière très simple, comme suit :

- Minuterie non activée**
- Minuterie activée**
→ par ex. 15 minutes pour aller aux toilettes la nuit
- Minuterie expirée**
→ signal au système d'appel

SafeSense® – Les capteurs intelligents de sortie de lit

En développant des produits pour les soins, wissner-bosserhoff tient compte d'une vision, celle de la préservation de la santé au cours de la vieillesse, du renforcement de l'autonomie des personnes âgées et de l'amélioration de leur qualité de vie. Le thème de la sécurité – qui inclut les capteurs intelligents de sortie de lit pour le jour et la nuit et de nouvelles possibilités techniques – joue ici un rôle essentiel.



Plus de sécurité – moins de mesures de restriction de liberté

- Réaction rapide du personnel soignant en cas de chute
- Sécurité élevée, même la nuit et le week-end quand il y a moins de personnel
- Moins de rondes
- Idéal avec les lits de soins bas sentida sc et la barrière latérale SafeFree®




SafeSense®
Téléchargement PDF



Concept Chalet

Modèle Ts | Homley
Décor Orme Salisbury naturel

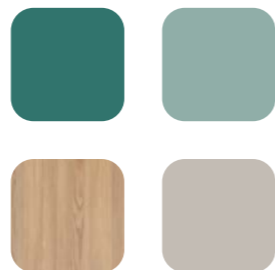

wissner-bosserhoff | sentida sc



sentida sc | wissner-bosserhoff

sentida sc Homley avec long-pan latéral et système de freinage central, spécialement conçu pour :

- les unités de vie pour personnes démentes
- les résidences services
- les cliniques de rééducation axées sur les maladies neurologiques
- l'apport de soins spécifiques à des résidents peu diminués physiquement



Connecter avec professionnalisme

Des solutions connectées innovantes qui apportent une aide dans les activités de soins individuelles et les processus de soins complexes

Pour les experts, la connectivité des soins à apporter aux personnes âgées est une occasion de soulager le personnel soignant grâce à des innovations techniques.

La connectivité aide au quotidien

En employant des capteurs de manière ciblée, il est, par exemple, possible d'identifier et de signaler assez tôt d'éventuels risques de chute ou une absence de mouvements chez les résidents.

L'utilisation d'appareils mobiles permet par ailleurs de travailler de manière mobile et flexible tout en

gagnant du temps. Ces appareils permettent d'accéder rapidement, et de n'importe où, à des informations relatives aux soins. Les relations sociales en général, mais également les relations avec les proches, peuvent être mieux entretenues.

Les processus de travail pourraient être encore mieux gérés à l'avenir si les établissements de santé analysaient et rassemblaient les données de leurs documentations numériques de manière systématique. Les résultats permettraient en effet de faire un lien entre les traitements effectués et les exigences

à respecter pour une meilleure gestion des soins.

wissner-bosserhoff travaille actuellement sur les trois thèmes suivants, ainsi que sur les risques qui y sont liés chez le résident : les chutes, les escarres et l'incontinence.

L'assistant numérique SafeSense® 3 peut aider à analyser les données et à prévenir au besoin.

Les soins ont besoin d'une connectivité – fonctionnelle, intelligente et humaine.



La société Vechtetel Pflege GmbH s'est donné pour objectif de réinventer les soins classiques apportés aux personnes âgées à l'aide de techniques innovantes. Nous avons opté pour SafeSense® 3 car la sécurité de nos résidents est notre première priorité. Une réaction plus rapide aux chutes peut souvent permettre d'éviter de sérieuses conséquences.

Eike Jonker, gérant de la société Vechtetel Pflege GmbH

Solution 1 SafeSense® 3 –

De l'assistant de sortie de lit à la plate-forme de soins connectée

Après plus de 6 ans d'expérience avec notre système de capteurs de sortie de lit intégré, l'heure est venue de laisser s'imposer un véritable assistant de soins connecté.

Avec les capteurs de sortie de lit SafeSense® et le lit de soins intelligent sentida 7-i, wissner-bosserhoff a, dès 2014, fait de précieuses expériences en

matière de produits connectés.

Aujourd'hui, SafeSense® est devenu un assistant de soins doté d'autres fonctions de soutien et, grâce à son architecture ouverte, il peut être préconisé comme plate-forme connectée pérenne. Cette dernière peut être facilement complétée par d'autres fonctions allégeant davantage la charge du personnel soignant.



-  Surveillance des mouvements
-  Surveillance de sortie de lit
-  Moniteur de soins & application
-  Détecteur d'humidité

Mise en réseau intelligente

SafeSense® 3



1

Appareils mobiles*

Un aperçu de toutes les données à tout moment



2

Logiciel pour l'ordinateur de la salle de soins avec visualisation des données

Prévention des escarres par la surveillance des mouvements

Prévention des chutes par la surveillance de sortie de lit

Sécurité

Protection des informations relatives aux résidents grâce à un transfert de données crypté et à un traitement de données décentralisé



3

Connexion au système d'appel infirmier*

Un plus en matière de sécurité pour les équipes travaillant la nuit et le week-end



4

Capteurs de lit brevetés

Assistance aux soins



Voir la vidéo



Le lit de soins du futur est plus qu'un lit – il permet des soins efficaces moyennant des solutions intelligentes et une augmentation de la qualité de vie pour le résident.

Uwe Deckert | wissner-bosserhoff GmbH





Concept Coucher de soleil

Modèle C | Mobile
Décor Teck Nordique



wissner-bosserhoff | sentida sc



sentida sc | wissner-bosserhoff

sentida sc Mobile, spécialement conçu pour:

- les unités de soins palliatifs
- les unités de vie apportant des soins spécialisés (par ex. patients en état végétatif)
- l'apport de soins spécifiques à des résidents quasi-immobiles



Soigner en fonction des besoins

Accéder au résident de manière optimale et sécurisée

Les mesures de mobilisation et les activités de soins quotidiennes apportées aux résidents peuvent être très fatigantes et éprouvantes pour le personnel soignant. Au cours de sa permanence, un soignant peut soulever jusqu'à 1,8 tonnes* au total. Le stress physique et les tensions des soignants peuvent avoir des répercussions négatives sur les résidents.

À l'inverse, les réactions de peur des résidents en résultant peuvent limiter considérablement les ressources, la motivation et la mobilité de ces derniers, de sorte qu'il peut y avoir des risques des deux côtés lors de l'apport des soins.

sentida sc peut aider aussi bien le personnel soignant que les résidents.



Voir la vidéo

Solution 1 Stratégie à 4 arrêts –

Des soins et un accompagnement adaptés à la situation et aux besoins

L'amplitude de réglage confortable de 23 à 80 cm permet

- une position pour les soins ergonomique, soulageant le dos, à 80 cm,
- une liberté de mouvement supplémentaire, en combinaison avec le relève-cuisses et le relève-jambes réglables séparément (par ex. lors des soins d'hygiène ou du traitement des plaies),
- un arrêt automatique de la hauteur variable à 41 cm, permet au résident de sortir du lit dans une position ergonomique correspondante à la hauteur d'un siège,
- un arrêt de sécurité à 31 cm de hauteur protège contre le coincement des pieds et constitue en même temps une bonne hauteur pour la mobilisation des résidents de petite taille,
- une position de sommeil sécurisée de 23 cm.


80 cm

Pour apporter des soins en tout confort



41 cm

Pour mobiliser le patient à hauteur de siège

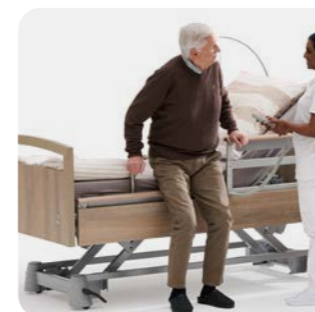

31 cm

Arrêt de sécurité / Mobilisation sécurisée pour les résidents de petite taille



23 cm

Aide à la prévention des chutes lors du sommeil



Solution 2 Frein central –

Frein centralisé au pied du lit de soins



En option, sentida sc dispose d'un frein central au pied du lit, facile d'accès. Il suffit de débloquer le frein central pour déplacer le lit simplement et rapidement – par ex. pour des opérations de nettoyage.




Solution 3 Sommier Confort – Plus de sécurité pour les résidents immobiles



Le sommier Confort est équipé de 55 éléments à ressort offrant un grand confort et un soulagement supplémentaire afin de prévenir tout dommage consécutif, par ex. une mobilité réduite.

Le **PLUS** de sentida sc :
Avec la double translation et la position fauteuil automatique, le sommier confort peut compléter des mesures de soins préventives et augmenter, en sus, la qualité de vie.


Solution 4 Rallonge de sommier intégrée – Réglable sans outil et de manière flexible

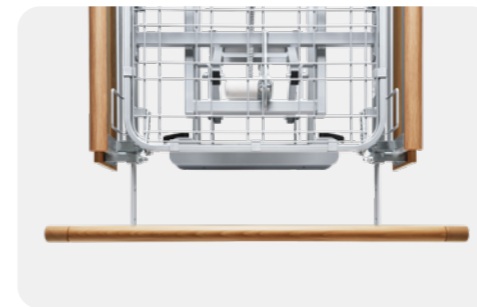

210 cm
Longueur du lit intermédiaire 210 cm : protection avec des barrières latérales plus longues au niveau des pieds, sans accessoires ni espaces supérieurs à 318 mm*
220 cm
Rallonge de sommier jusqu'à 220 cm : réglable temporairement, également sur les lits sentida sc équipés de demi-barrières latérales – protection intégrale garantie au moyen d'une poignée de mobilisation côté pied (disponible en accessoire).

sentida sc dispose d'une rallonge de sommier intégrée qui répond, dans chacune des configurations proposées, aux exigences de la norme IEC 60601-2-52.

Solution 5 Butée de protection murale – protège le lit d'éventuels dommages

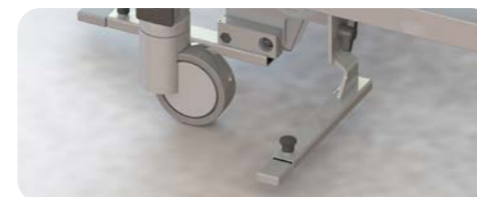

Les butées de protection peuvent être montées à la tête ou sur le côté du lit afin de protéger le lit d'éventuels dommages lors des manoeuvres.



Concept Provence

Modèle G | Accessible
Décor Bouleau de Lund



wissner-bosserhoff | sentida sc



sentida sc | wissner-bosserhoff

sentida sc Accessible avec long-pan latéral,
spécialement conçu pour:

- soins en établissement d'hébergement
- soins et assistante aux personnes souffrant de handicaps physiques légers
- soins de courte durée

Modèle

Panneau de tête/de pied



Design A
Panneau de tête/de pied



Design Ak
Panneau de pied rabattable



Design C
Panneau de tête



Design C
Panneau de pied



Design Cx
Panneau de pied bas



Design Df
Panneau de tête/de pied



Design Dfx
Panneau de pied bas



Design G
Panneau de tête



Design G
Panneau de pied



Design Gx
Panneau de pied bas



Design O
Panneau de tête/de pied



Design Ts
Panneau de tête



Design Ts
Panneau de pied



Design Tsx
Panneau de pied bas


Long-pan latéral (option)



En option, disponible avec un long-pan latéral et 4 barrières latérales SafeFree®.

3 surfaces de couchage


Modularité également dans le choix du plan de couchage

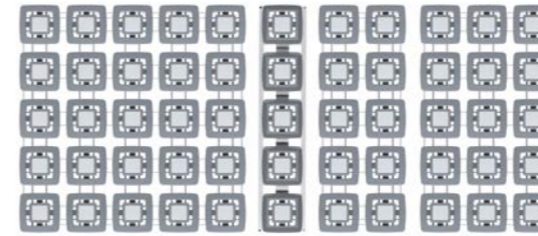

Confort

- 55 éléments de suspension
- cadre du plan de couchage en aluminium blanc


Grand confort de couchage & soulagement facile de la pression

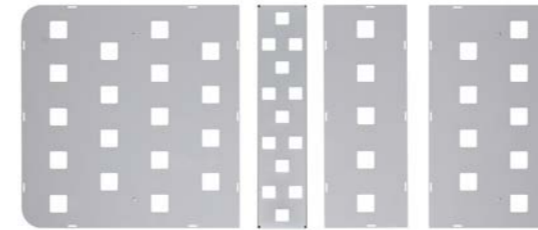

EasyClean

- plaque en ABS
- plaques amovibles

Facile à nettoyer

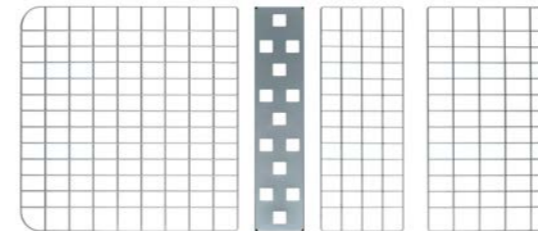

Aero

- Supports en treillis métallique
- Cadre du plan de couchage en aluminium blanc

Bonne aération



Housses ou design hôtelier

Tous les décors en tissu et en similicuir montrés sont disponibles comme housses, que vous pouvez enfiler vous-même de manière simple et rapide sur les panneaux de tête et de pied* de vos lits de soins. Les housses sont extrêmement robustes, résistantes à l'humidité et aux salissures, étanches à l'eau et respirantes.



Modèle : Df
Tissu : Sable
Décor : Érable Plane



Modèle : C
Décor principal : Érable Plane
Décor d'accentuation : Orme Salisbury naturel



Design de lit bicolore

Tous les décors bois peuvent être combinés un design de lit bicolore :
Décor principal
Tête, pied de lit & long pan
Décor d'accentuation
Main courante Barrières latérales, Main courante panneaux

Coloris & modèles

Les coloris peuvent diverger des illustrations, nous recommandons d'utiliser un échantillon original pour le choix définitif du coloris.

Coloris | Décors*

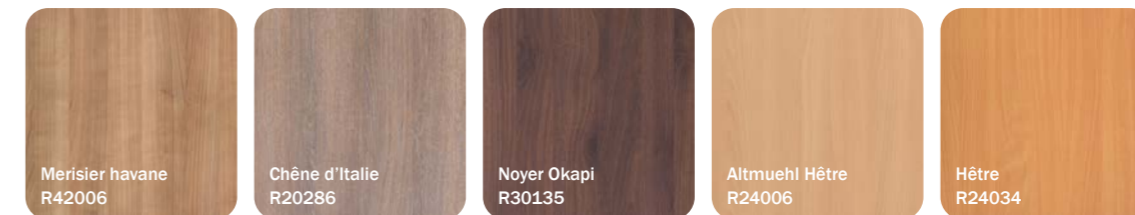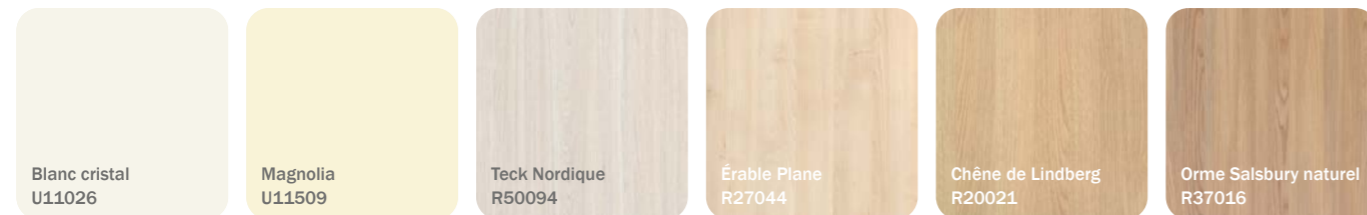

Similicuir | Housses pour panneau de tête/de pied Df* ou design hôtelier



Tissu | Housses pour panneau de tête/de pied Df* ou design hôtelier



Similicuir : Smoke
Décor : Teck Nordique



Tissu : Sable
Décor : Érable plane



Caractéristiques techniques

Selon l'annexe VIII, n° 13 du Règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR) 2017/745, le lit de soins sentida sc est un dispositif médical de classe I.

Dimensions extérieures, min./max. ¹⁾	205 x 103 / 208 x 104 cm
Surface de couchage	90 x 200 cm
Dimensions du matelas	87 - 90 x 200 cm
Réglage de la hauteur ²⁾	23 - 80 cm
Garde au sol	15 cm
Longueur du dossier	88 cm
Réglage du dossier	70° ± 5° y compris recul du dossier d'env. 11 cm
Translation du dossier	11 cm
Longueur de l'assise	21 cm
Translation du relève-cuisses	6 cm
Longueur de la cuisse	36 cm
Réglage du relève-cuisses	30° ± 5°, y compris recul du relève-cuisses d'env. 6 cm
Double translation	17 cm d'espace supplémentaire dans le lit
Réglage du repose-jambes	32°
Longueur du repose-jambes	55 cm
(Anti-) Trendelenburg	tête env. 17° / pied env. 17°
Charge de fonctionnement max en sécurité ³⁾	270 kg
Max. Poids du résident	235 kg
Poids du lit ⁴⁾	env. 115 kg
Préparation SafeSense® 1+3	incluse
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II

1) En fonction du design de la tête/du pied de lit choisi | 2) Pour roulettes doubles de 50 mm et roulettes de 100 mm pour le modèle extramobil | 3) **Recommandation du fabricant** : le poids maximal poids du résident peut être augmenté en fonction du poids du matelas et des accessoires utilisés. Ex. : charge de travail sûre 270 kg - matelas 10 kg - accessoires 10 kg = poids maximal du résident 235 kg. En cas d'utilisation de matelas/d'accessoires lourds, le poids du résident est modifié en conséquence ! | 4) en fonction de l'équipement

Sécurité

La société wissner-bosserhoff GmbH est certifiée selon les dispositions de la norme ISO 9001 pour les systèmes de gestion de la qualité, de la norme DIN EN ISO 13485 pour la fabrication de dispositifs médicaux et de la norme ISO 14001 pour la gestion de l'environnement. wissner-bosserhoff soumet volontairement et régulièrement ses procédés de fabrication et son management au contrôle de l'organisme allemand de contrôle et de certification TÜV.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



Certificat CB pour la sécurité des produits, TÜV Süd



Expertise des barrières latérales



ISO 9001
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
www.tuev-sued.de/ms-zert



ISO 14001
Zertifiziertes Umweltmanagementsystem
www.tuev-sued.de/ms-zert





EN ISO 13485
www.tuev-sued.com/ps-cert





Nous avons comptabilisé les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de notre entreprise**, ce qui nous a permis l'acquisition de certificats de protection du climat pour les années 2022 et 2023.

Vous trouverez les tables de nuit et les autres accessoires dans les brochures dédiées ou sur www.wi-bo.fr

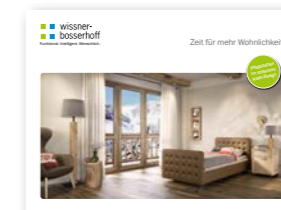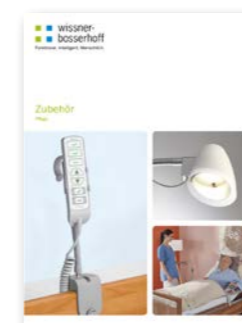

■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

wissner-bosserhoff Belgium B.V.

Research Park Haasrode | Evenementenlaan, 8 | 3001 Heverlee
Tél. +32 16 89 81 91 | info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

LINET[®]

LINET France SAS

7, rue Augustin Fresnel, Z.I. N 1 | 37170 Chambray-Lès-Tours
Tél. +33 247 250 210 | info@wi-bo.fr | wi-bo.fr

bigla care

Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Suisse
Tél. +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | bigla-care.ch

Members of LINET Group

