

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

L'élégance fonctionnelle au service des soins

SafeSense®

Alarme de sortie de lit



Système de sortie de lit

Qu'est-ce que cela signifie ?

SafeSense® avertit le personnel soignant que le résident/patient a quitté le lit ou est sur le point de le faire. Cela permet de prévenir les risques potentiels de chutes et d'en limiter les conséquences. Un système de sortie du lit fonctionne selon le principe d'un feu de circulation. Son mode de fonctionnement est donc clair et très simple à comprendre :



Minuterie désactivée



Minuterie activée

→ par ex. 15 minutes, le temps d'aller aux toilettes dans la nuit



Temps écoulé

→ envoi d'un signal à l'appel malade

SafeSense® = sécurité + liberté

De jour comme de nuit, grâce au capteur intelligent de sortie de lit

Prévenir les chutes de manière durable pour une sécurité optimale : telle est l'ambition du système de sortie du lit SafeSense® de wissner-bosserhoff.

On dénombre dans les maisons de soins et les cliniques allemandes 1,5 chute par lit et par an.*
Les dommages pour la santé engendrés par ces chutes sont souvent très graves et parfois même irréversibles, notamment chez les personnes âgées.

SafeSense® permet d'améliorer sensiblement le niveau de sécurité, en particulier dans le cadre des services de nuit et de week-end où le personnel est restreint. La nuit, le système de sortie du lit peut contribuer à réduire le recours aux barrières latérales, préservant ainsi la liberté du résident/patient. Un système automatique de veilleuse lui permet de se repérer facilement s'il souhaite aller aux toilettes. La veilleuse s'allume automatiquement lors de la sortie du lit et s'éteint au retour du résident/patient. La minuterie de l'appel malade permet en outre d'ajuster sans palier la durée de l'intervalle de temps en fonction de la mobilité de chacun des résidents/patients.

5


millions de chutes
recensées chaque année
chez les personnes âgées :

Près d'un tiers des plus de 65 ans,
ainsi que la moitié des plus de
80 ans chutent au moins une
fois par an.

Rien qu'en Allemagne, près de
5 millions de personnes âgées sont
victimes de chutes chaque année.

(Source : « Gesundheit und Krankheit im Alter »
(Santé et maladie dans la vieillesse).

Directeur de la publication : Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/
Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/
Thomas Ziese, Robert Koch-Institut, Berlin 2009)

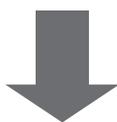

Prévention avec
les lits de soins bas
sentida



Prévention avec le
lit de soins universel
image 3 et sa
position basse



Prévention des chutes dans les établissements d'hébergement médicalisés et les établissements de soins





Plus de sécurité – moins de chutes / MRL*

- Réaction plus rapide en cas de chute
- Meilleur niveau de sécurité pendant la nuit et le week-end
- Idéal en association avec les lits de soins bas sentida et image 3 ainsi qu'avec les barrières latérales SafeFree®
- Résultats et étude de l'initiative contre la contention, « Werdenfelser Weg »**



Préserver la mobilité

- Grâce aux lits de soins bas sentida / image 3
- Grâce au système à trois crans de WIBO
- Grâce aux barrières latérales Safe-Free® de WIBO



Protection individuelle

- Une veilleuse, qui se déclenche automatiquement par le biais de capteurs, permet de sécuriser les trajets jusqu'aux toilettes.
- Le système de minuterie réglable de l'appel malade (de 0 à 30 min) s'adapte à la mobilité individuelle du résident/patient



Vos avantages en tant qu'établissement de soins

- Investissement raisonnable pour une sécurité maximale
- Sécurité du patient/résident dans chaque position de soins
- Protection juridique du personnel soignant sans obligation de se conformer à des exigences supplémentaires
- Exécution effective et efficace des activités de soins
- Pas de frais supplémentaires pour l'acquisition d'accessoires de sécurité
- Exécution efficace des activités de soins avec les sangles de contention

Comment commander SafeSense®

Pour les lits de soins WIBO



- Intégré en tant qu'option
- Sous forme de kit d'adaptation pour tous les lits de soins électriques de wissner-bosserhoff (à partir de 2002)
- Disponible en solution filaire ou wifi


Pour le lit de soins image 3



- Disponible en option
- Disponible en solution filaire ou wifi


Les composants SafeSense®

Tapis à capteur 2

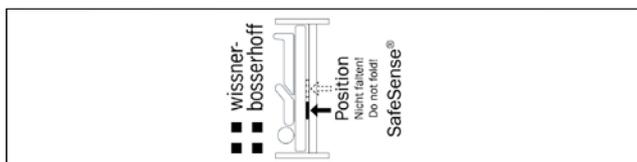


Article 02-000781
80 × 20 cm


Boîtier Bed-Exit 2

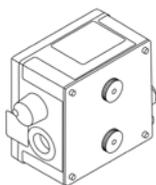

Article 04-1851
avec support universel
disponible en solution filaire ou wifi

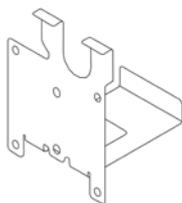


Article 01-011193
Tôle de maintien pour
moteur DU09

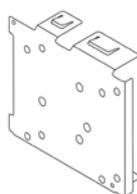

Article 01-011194
Tôle de maintien
pour moteur Q7

Kit de raccordement

Câble d'adaptateur avec et sans interrupteur marche/arrêt et fiche adaptée pour le raccordement à l'installation d'appel (spécifique au client) des solutions filaires et wifi

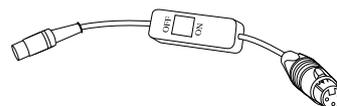

Récepteur wifi

Disponible uniquement pour les lits de soins !



Récepteur d'appels pour les dispositifs d'appel malade

- Peut être raccordé à tous les systèmes courants d'appel malade grâce à l'adaptateur WIBO
- Mini récepteur wifi
- Jusqu'à 32 émetteurs programmables
→ Équipement personnalisé à la chambre en fonction des attentes/ besoins des résidents
- Avec fonction soins. Appel bloqué pendant 15 min.



Prise émetteur

- Signalisation acoustique et visuelle des appels malade
- Confirmation simple directement sur l'émetteur d'appels
- Parfaitement adapté aux maisons de retraite et unités de petite taille sans dispositif d'appel malade
- Basse consommation ! Pas plus de 0,3 W en mode veille



Prise récepteur

- Allume par ex. une veilleuse ou un lampadaire dans la chambre
- Jusqu'à 32 émetteurs programmables
- Grâce aux capteurs, un signal wifi est automatiquement envoyé en cas de sortie du lit
- Basse consommation ! Pas plus de 0,2 W en mode veille



Téléphone à impulsion avec bracelet émetteur

- Le téléphone remplit à la fois les fonctions de communication habituelles et celles d'une centrale d'appels d'urgence
- L'appel reçu est transmis consécutivement à trois numéros préenregistrés
- Un dispositif intégré de communication permet de dialoguer avec le résident pendant 3 minutes
- Écran lumineux

Fonctionnement



Conseils d'utilisation

		MR* / MS* avec appel malade	Petites MR* / MS* et unités sans appel malade	Soins à domicile
Boîtier Bed-Exit 2	Câble	✓		
	Wifi	✓	✓	✓
Récepteur wifi		✓		
Prise émetteur			✓	✓
Prise récepteur		✓	✓	✓
Téléphone avec bracelet émetteur			✓	✓

Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen

Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64

E-mail: info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff France

7, rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Les-Tours

Tél : +33 (0) 247 25 02 10 | Fax : +33(0) 247 48 21 06

E-mail : info@wi-bo.fr | www.wi-bo.fr



wissner-bosserhoff Germany



Numéros des brevets
européens :
EP000001623654
EP000002052707

